




Dermatolodzy w profesjonalnych klinikach i salonach kosmetycznych stosują technologię IPL (Intense Pulsed Light). Ten sam system wykorzystywany jest w urządzeniu Remington i-Light Pro Face & Body. Badania kliniczne potwierdzają, że oferuje ono skuteczne i bezpieczne usuwanie owłosienia w domowym zaciszu.



JAK DZIAŁA I-LIGHT

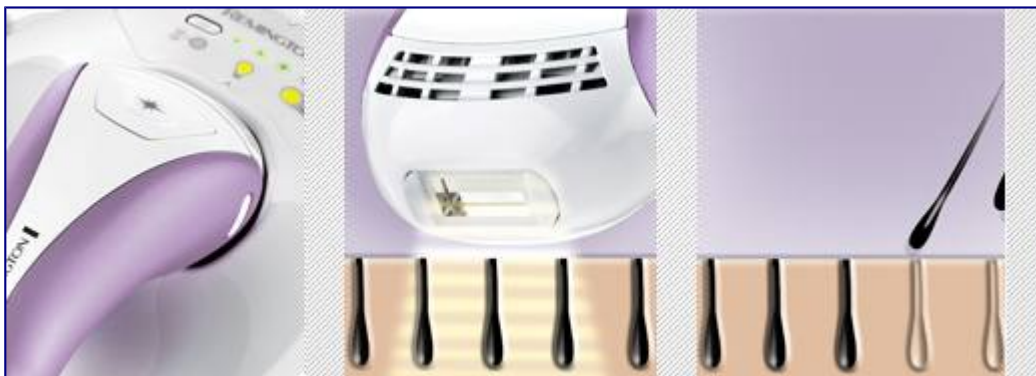

Dowiedz się jak działa i-Light Pro Face & Body

Jak działa i-Light

IPL6000F wykorzystuje energię światła, która jest emitowana przez ksenonową lampę błyskową i skupiana optycznie. Energia światła jest absorbowana przez melaninę w mieszk włosowym pod powierzchnią skóry hamując wzrost włosów opóźniając ich odrastanie.

W czasie wzrostu włos mieszek włosowy przechodzi zazwyczaj trzy opisane poniżej fazy:

- **Faza anagenowa (wzrostu)** – faza aktywnego wzrostu mieszków włosowych. Stężenie melaniny jest na tym etapie najwyższe, ponieważ odpowiada za pigmentację włosów. Za pomocą technologii IPL można usuwać wyłącznie włosy znajdujące się w fazie anagenowej
- **Faza katagenowa (degradacji)** – bardzo krótki etap przejściowy następujący po fazie anagenowej i sygnalizujący koniec aktywnego wzrostu włosa. Ten etap trwa zazwyczaj 2-3 tygodnie
- **Faza telogenowa (spoczynku)** – mieszek włosowy jest na tym etapie zupełnie nieaktywny. Jest to najdłuższy etap trwający około 100 dni. W tym okresie nowe włosy wypychają włosy stare. Umożliwia to ponowne rozpoczęcie cyklu wzrostu włosów

Tylko włosy w fazie anagenowej są podatne na zabieg - dlatego zalecamy systematycznie powtarzanie zabiegów w cyklu trzy razy zabieg co 2 tygodnie (dla zabiegów na ciało) i w cyklu cztery razy zabieg co 2

tygodnie (dla zabiegów na twarzy kobiecej wykonanych za pomocą głowicy przeznaczonej do zabiegów na twarz) w celu osiągnięcia znakomitych rezultatów.